


# Easy Line Remote™ 1.0

使用手冊

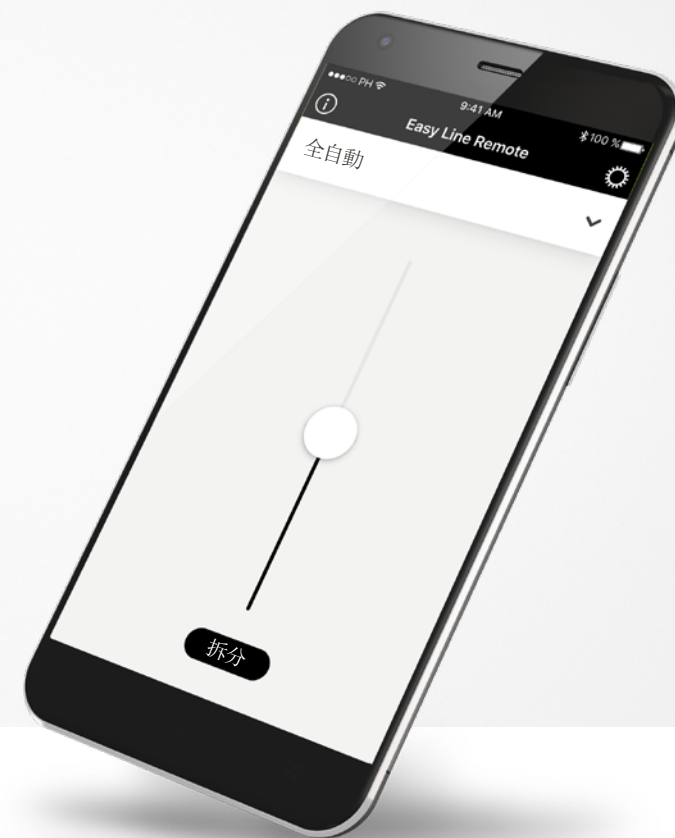

Easy Line™  
Accessories

# 前言

請詳細閱讀此使用者說明，以充分利用該 App 所提供的所有功能。

## 預期用途

Easy Line Remote App 適用於 Android™ 和 Apple® iOS 裝置<sup>1</sup>，可對 Sonova 助聽器進行某些方面的調節。



### 相容性資訊：

Easy Line Remote App 與 Sonova 生產的部分具備 Bluetooth® 連接功能的助聽器相容。

Easy Line Remote 可在具有藍牙低功耗 (BT-LE) 功能的手機上使用，並且相容運行 iOS 10.2 或更高版本的 iPhone® 5s 及更新款產品。

Easy Line Remote 可在支援藍牙 4.2 和 Android OS 6.0 及更新版本的 Google 行動服務 (GMS) 認證 Android 裝置上使用。



某些手機有觸摸音或鍵盤音，這些聲音可能造成助聽器串流干擾。

請移至手機設定，選取聲音，並確保停用所有觸摸音和鍵盤音。

<sup>1</sup> 相容手機：Easy Line Remote App 只能在具有 Bluetooth® 低功耗技術功能的手機上使用。

Bluetooth® 文字標記和標誌是歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有的註冊商標。

Apple® 和 iPhone® 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。


Android™ 是 Google Inc. 的商標。

iOS™ 是 Cisco, Inc.的商標。


# 目錄

快速指南	3
第一次使用 App	4
與相容助聽器配對	5
連接您的助聽器	6
配對疑難排解	7
Easy Line Remote 主檢視	8
設定	10
重要安全資訊和符號解釋	13

# 快速指南

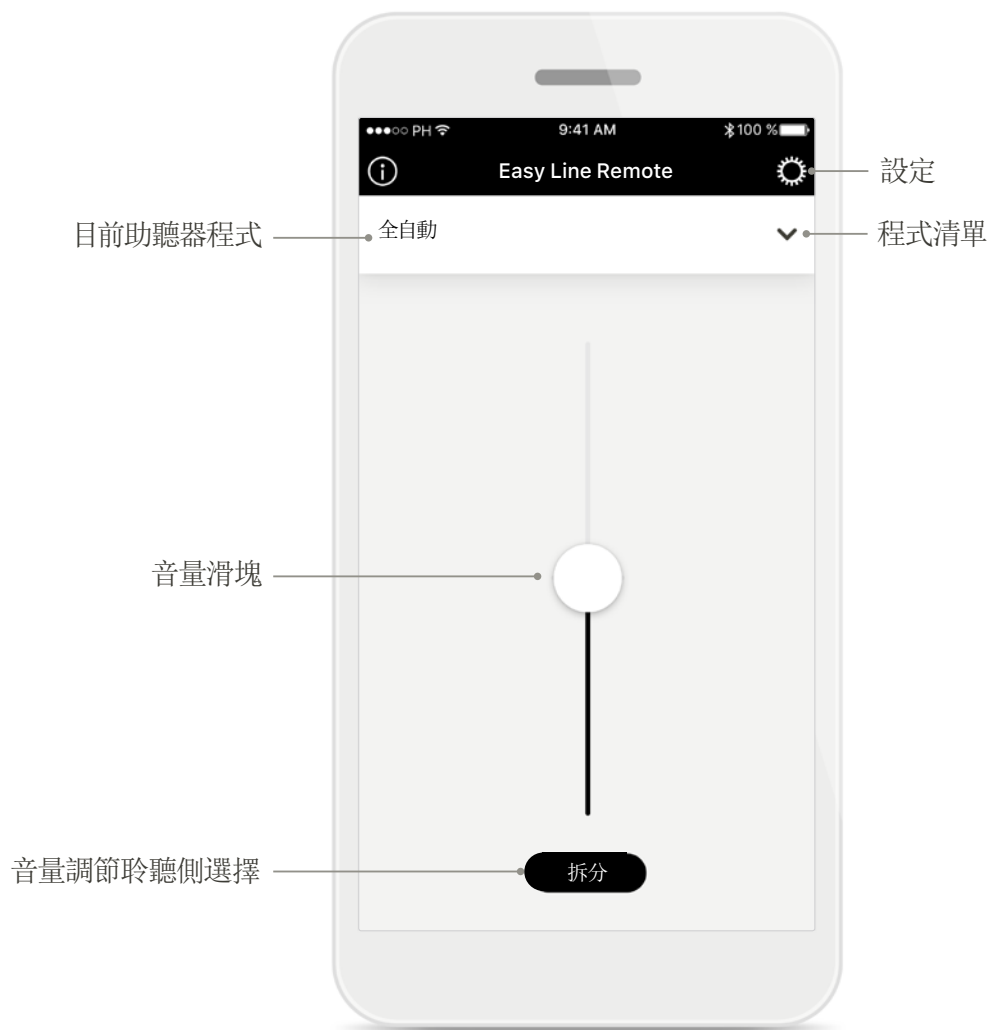

主畫面

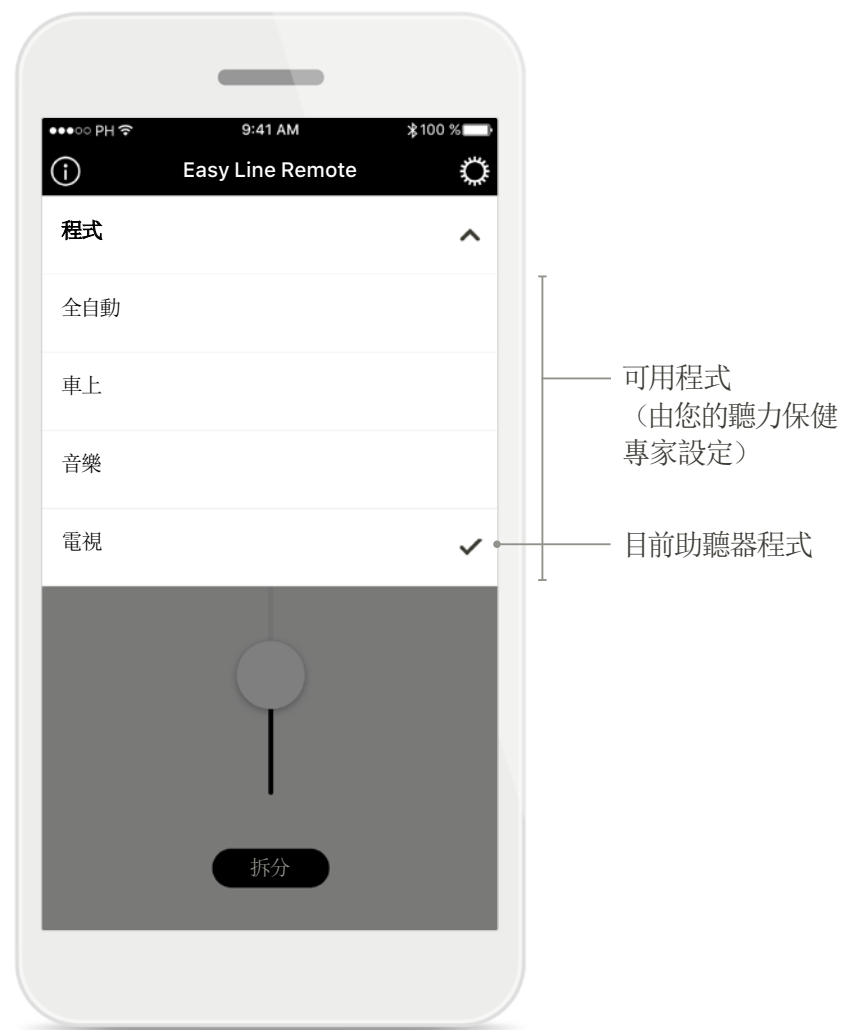

程式清單


# 第一次使用 App

安裝 App 後，需要採取幾個步驟。這些步驟僅需實施一次。



## 相容裝置

本 App 僅適用於擁有藍牙連接功能的相容助聽器。

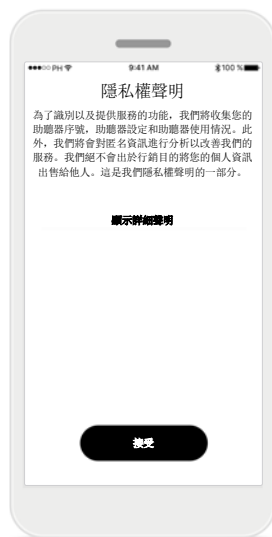

## 隱私權原則

在繼續使用本 App 之前您必須 **[接受]** 隱私權原則。



## 產品改進

您可以選擇是否共用使用資料，分享您的使用資料可以幫助我們瞭解並改進今後的產品。



## 藍牙

必須啟動藍牙以與助聽器通訊，才能使用本 App。



## 位置

在 Android 裝置上，您在與藍牙裝置配對時必須啟動位置服務。

## 與可相容助聽器配對

要將具備藍牙功能的助聽器與 Easy Line Remote App 連接，請按照以下說明進行操作。



### 配對說明

點按 [繼續] 開始搜尋過程。點選非充電或可充電助聽器的說明，瀏覽您的裝置使用說明。



### 正在搜尋

App 正在搜尋相容的助聽器，偵測到後將會顯示結果。



### 選擇

當您的助聽器顯示在清單中時，點按 [連接]。




### 數個

如果偵測到多個助聽器，他們會相對應地顯示。

# 連接您的助聽器

要將具備藍牙功能的助聽器與 Easy Line Remote App 連接, 請按照以下說明進行操作。

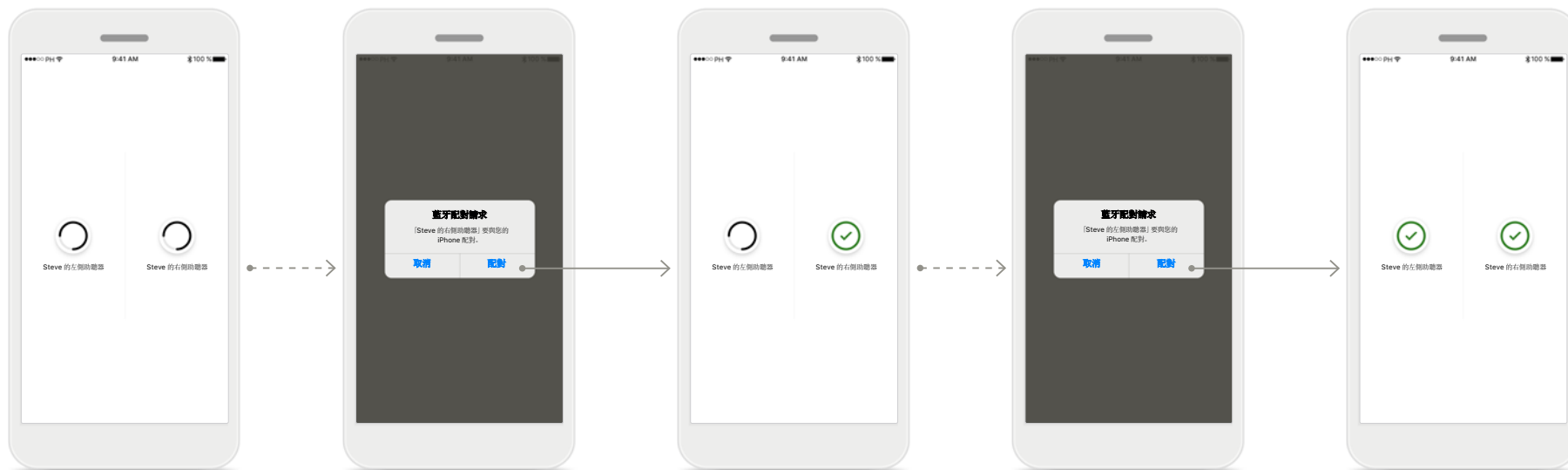

## 助聽器配對

App 將開始單獨連接每個助聽器。

## 確認配對請求

在 iOS 裝置上請點按快顯方塊的 [配對] 確認。

## 配對第二個助聽器

app 將開始連接另一個助聽器。

## 確認配對請求

在 iOS 裝置上請點按快顯方塊的 [配對] 確認。

## 配對完成

兩個助聽器已經完成配對。

# 配對疑難排解

設定過程中可能出現的錯誤。




## 裝置不相容

App 無法與裝置連接，因為他們不相容。



## 連接錯誤

無法建立與助聽器的連接。  
點按 [重試] 重啟這一過程。

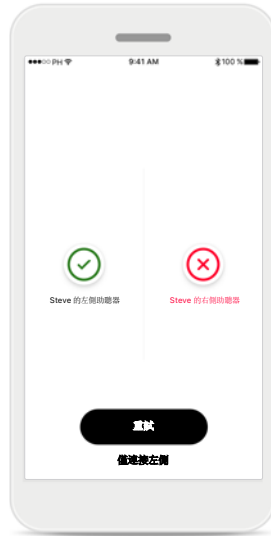

## 助聽器連接錯誤

如果連接助聽器失敗，您可以：

1. 點按 [重試] 重新開始配對過程。
2. 繼續，僅連接其中一個助聽器。




## 連接雙側助聽器失敗

點按 [重試] 重新開始配對過程。請確定按照說明進行。


# Easy Line Remote 主檢視

可用於所有助聽器的功能。

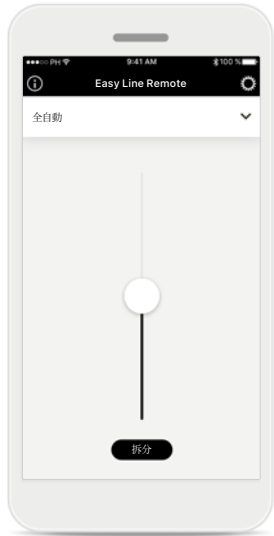


## 調節助聽器音量

上下移動滑塊以增減兩側的助聽器音量。

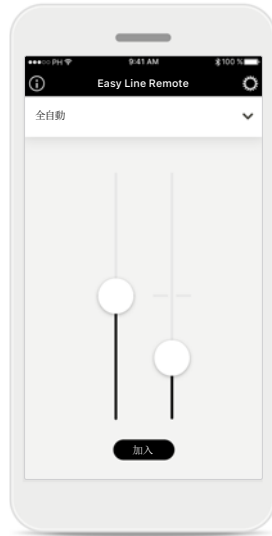

## 拆分音量

按下 [拆分] 按鈕可將助聽器音量滑塊拆分，分別調節每一側的音量。

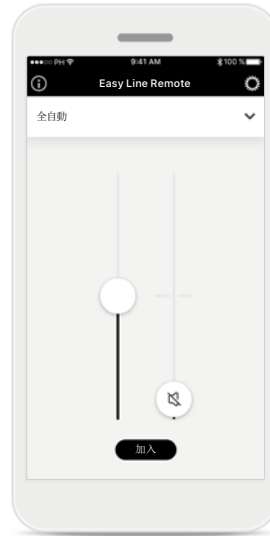

## 靜音

您可將音量滑塊向下移動到末端，將助聽器靜音。




## 存取程式

點按音量滑塊上方的功能表存取程式清單。可用程式取決於您的聽力保健專家對您助聽器之設定。




## 存取提示

點按主螢幕左上方的  圖示，會顯示一些 App 基本使用提示。




# Easy Line Remote 主檢視

功能取決於您的助聽器如何設定，以及您擁有的配件。

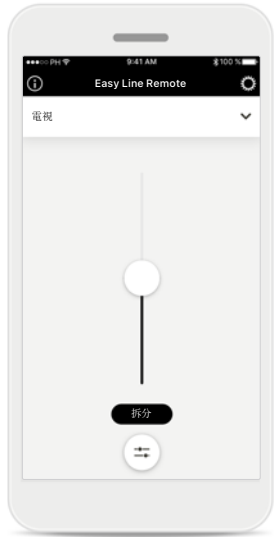

## 存取程式選項

一些程式可能提供更多的調整可能。如果可以的話，在音量滑塊底部會顯示一個特殊圖示。

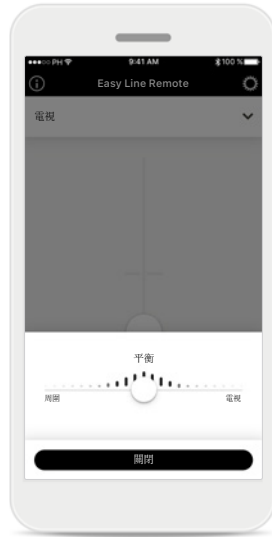


## 環境平衡

如果您使用外部媒體串流裝置（例如電視連接器、音樂），您可以選擇更多地關注媒體聲音，而較少關注周圍的聲音。




## 耳鳴遮蔽器\*

如果您有耳鳴，並且您聽力保健專家教過您如何使用耳鳴遮蔽器，您可以在此調節遮蔽雜訊的音量。

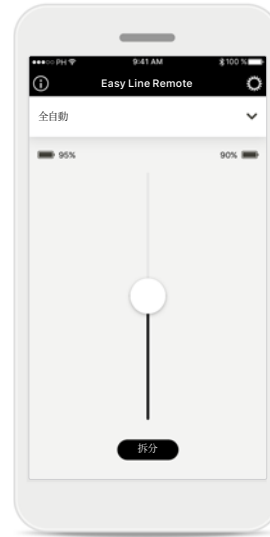

## 電池電量

對於帶可充電電池的助聽器型號，您可以從連接的助聽器上直接查看當前的充電狀態。

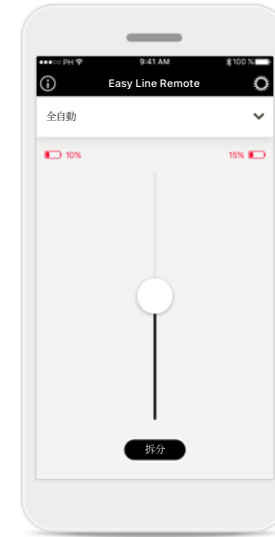


## 電池電量

對於帶可充電電池的助聽器型號，如果電池充電量低於 20%，圖示和值變為紅色，考慮儘快為您的助聽器充電。

\* 不適用於所有助聽器。

# 設定

可以在設定中瀏覽 App 的一般資訊。

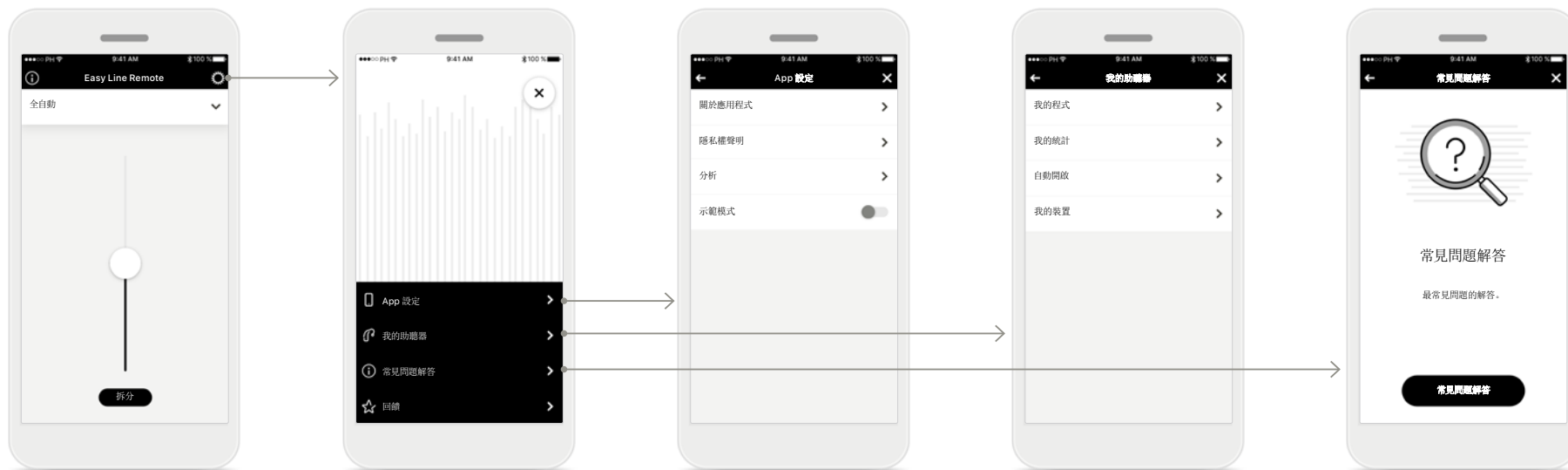

## 存取設定

點按主螢幕頂端的  
[齒輪圖示] 存取設定。

## 設定

所有可用設定均列在設定螢幕中。

## App 設定

可以在這裡存取所有 App 相關資訊。

## 我的助聽器

可以在這裡存取所有助聽器相關資訊和設定。僅有可充電助聽器才提供自動開啟選項。

## 常見問題解答

線上提供更多資訊和協助。

# 設定

## 更換程式名稱



### 我的助聽器

點按清單中 [我的助聽器]。

### 我的程式

點按清單中 [我的程式]。

### 選取程式

點按您想要變更名稱的程式。

### 編輯螢幕


在程式詳細資料頁，點按 [編輯] 圖示。

### 變更標籤

在輸入區域輸入新的程式名，按下右上角的 [打勾圖示] 確認。您可以隨時點按左上角的 [X] 圖示放棄變更。

# 設定

## 重設配對

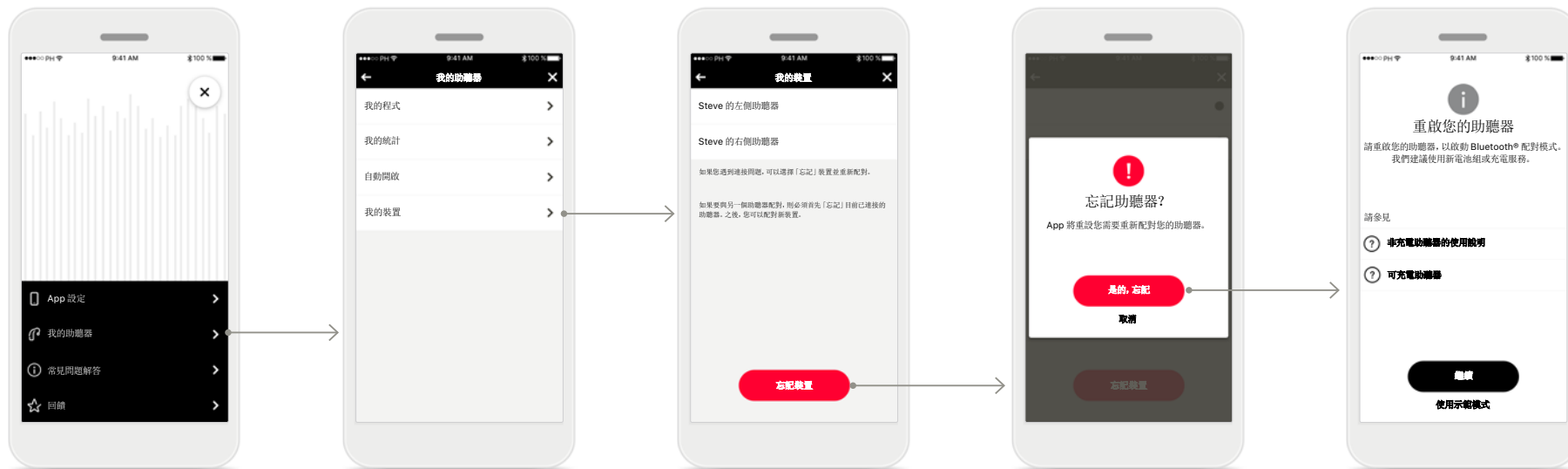

### 我的助聽器

點按清單中 [我的助聽器]。

### 我的裝置

點按清單中 [我的裝置]。

### 忘記裝置

要刪除助聽器與智慧型手機的連接，請點按 [忘記裝置]。

### 確認


請點按快顯方塊中的 [是的, 忘記] 確認。

### 繼續配對

按照第 5 頁的說明繼續。

## 重要安全資訊

 您負責個人智慧型手機的使用。請細心操作智慧型手機和 App。


 如果需要紙本使用說明，請聯絡製造商。紙本使用說明會在 7 天之內為您寄出。


 如果助聽器因異常的場干擾而對裝置沒有反應，請遠離干擾場。

## 符號說明

 此符號表示，使用者必須閱讀本使用指南內的相關資訊並將其考慮在內。

 此符號表示使用者務必要注意該使用指南中的相關警告通知。

 搬運和產品安全性方面的重要資訊。

 製造商使用 CE 符號旨在證實，本 Easy Line 產品符合醫療器械指令 93/42/EEC 的要求。CE 標記加貼於 2019 年。

CE 符號後面的數字符合遵循上述提及的認證機構法規。



Sonova AG • Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa • Switzerland



0459